

checkToP®

1000 mUI/mL

A self-test to check the outcome of First Trimester Termination of Pregnancy (ToP) or miscarriage

For the measurement of hCG above 1000mIU/mL

INTRODUCTION

checkToP® test is not a classical pregnancy test. checkToP® is a low sensitive urinary rapid test for the determination of the hCG (human Chorionic Gonadotropin) level in urine for home use, to determine the outcome after a previous Termination of intrauterine Pregnancy (ToP) of first trimester and miscarriage.

Your Health Care Professional will explain you if and how to use this test.


CONTENTS

Ref. 3066-1000AI: Each pack contains one (1) instruction for use and one (1) checkToP® test packaged in a hermetically sealed aluminium pouch containing one desiccant sachet.

Ref. 3067-1000AI: Each pack contains twenty (20) instructions for use and twenty (20) checkToP® tests packaged in a hermetically sealed aluminium pouch containing one desiccant sachet.

PRINCIPLE OF THE TEST

checkToP® is a rapid qualitative test for the presence of hCG in urine. In 5 to 10 minutes, it will detect an hCG level of 1000 mIU/mL or more. When the hCG level is below 1000 mIU/mL, only one coloured band appears in the control window but no coloured band appears in the test window. When the hCG level is above 1000 mIU/mL two coloured bands appear, one in each window.

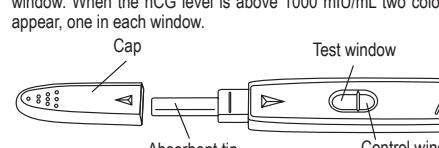

PRECAUTIONS

1. This test is exclusively intended for external use only (in vitro diagnostic use). Do not swallow.

2. Carefully read the instructions before carrying out the test. The test is not reliable unless the instructions are strictly followed.

3. Store between +4°C to +30°C. Do not freeze.

4. Do not use after the expiry date. The expiry date is printed on each of the aluminium pouches and is also printed on the external package. Do not use if the aluminium pouch has been damaged.

5. Do not reuse checkToP®.

6. Keep out of reach of children.

7. After use please dispose of all kit components into domestic waste.


PROCEDURE

The test must be performed after Termination of Pregnancy at a time indicated by your gynaecologist, usually between 10 to 20 days after the first drug intake in Medical ToP

- miscarriage

1. Remove the checkToP® test device from the aluminium foil pouch. Discard the small sachet.

2. Remove the cap and either

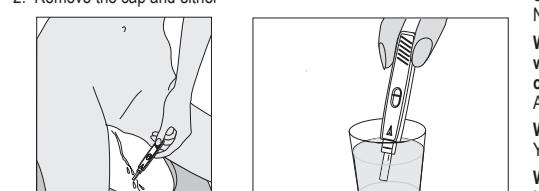

- hold the absorbent tip directly in your urine stream for more than 10 seconds. Will I still obtain a correct result?

I left the absorbent tip in my urine for less than 5 seconds. Will I still obtain a correct result?

What if the line in the test window is darker than the line in the control window or the line in the test window is lighter than the line in the control window?

As long as you see a line in each window, the test result is positive.

What should I do when I have the result?

You must follow the advice given by the medical staff managing you.

What if I don't wait the full 5 minutes before reading the test?

If you read the test before 5 minutes, you may not get the test enough time to work, and the test result may not be accurate. DO NOT INTERPRET the results if 10 minutes have elapsed after having brought the absorbent tip into contact with urine.

How accurate is the test?

The checkToP® is very accurate and has been used by health care professionals to confirm the success of Medical Termination of Pregnancy up to 9 WA (hospitals and laboratories).

Evaluation reports show that checkToP® can detect hCG above 1000mIU/mL in over 99% of cases. No test is perfect and even if the test is negative, you should still contact your health care provider if you have symptoms of pregnancy such as bleeding, no period at the expected time, tender breasts, feeling sick, and tummy growing.

Can I use checkToP® to diagnose a pregnancy?

Yes but checkToP® is not able to detect very early pregnancies and only shows positive if the hCG hormone is more than 1000 mIU/mL.

Other pregnancy tests are more sensitive and give a positive result starting from 25 to 50 mIU/mL.

WARNINGS

- checkToP® cannot be used for pregnancies where the initial hCG was lower than 1000mIU/mL.

- Use checkToP® only with a medical treatment ordered by your treating doctor. The clinical interpretation of the test has to be done with according to the medical staff managing you.

Distributed by: NORDIC PHARMA - Under EXELGYN licence
Product advice: info@exelyn.com / +33(0)1.73.00.16.40

Manufactured by: VEDALAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cérise B.P.181
61006 ALENCON Cedex France

Note: One band can be darker than the other. The two bands can be any shade of pink-purple and can be lighter or darker than the control. However, you should see two clear parallel bands.

Negative test result:



If only one pink coloured band appears in the control window (the smaller window) and no band appears in the test window (the largest window), the test is negative. Termination of Pregnancy or miscarriage is confirmed.


checkToP®

1000 mUI/mL

Test d'autodiagnostic à utiliser pour confirmer l'interruption de grossesse du premier trimestre ou pour confirmer une fausse couche spontanée.

Mesure le taux d'hCG au-dessus de 1000 mUI/mL

Inconclusive:

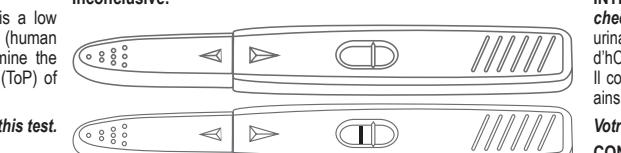

INTRODUCTION

checkToP® n'est pas un test de grossesse classique. checkToP® est un test rapide de urinaire pour la détermination de l'hCG (hormone chorionique gonadotrope) dans les urines pour déterminer le résultat après une interruption de grossesse intra-utérine (ToP) ou un avortement spontané.

Votre médecin vous expliquera si et comment utiliser ce test.

CONTENU

Ref. 3066-1000AI: Chaque boîte comprend une (1) notice et une (1) test checkToP® emballé dans un sachet en aluminium scellé contenant un sachet désiccant.

Ref. 3067-1000AI: Chaque boîte comprend vingt (20) notices et vingt (20) tests checkToP® emballés individuellement dans un sachet en aluminium scellé contenant un sachet désiccant.

Le test est inconcluante si il n'y a pas de couleur dans la fenêtre de contrôle. Même si un trait de couleur apparaît dans la fenêtre de résultat, il est recommandé de refaire le test avec un nouveau test checkToP® sur un échantillon d'urine fraîche obtenu 24 heures après le test initial.

QUESTIONS AND ANSWERS

How does the checkToP® test work?

When a woman becomes pregnant, her body begins to produce a hormone, humain Chorionic Gonadotropin (hCG), qui est excreté dans les urines où sa concentration augmente avec le temps. Le checkToP® test utilise des anticorps spécifiques détectant spécifiquement l'hormone hCG dans les urines. Le test détecte la présence d'un taux d'hCG de 1000 mUI/mL ou plus. Le résultat apparaît entre 5 et 10 minutes.

FONCTIONNEMENT

checkToP® est un test qualitatif de détection rapide de présence d'hCG dans les urines. Le test détecte la présence d'un taux d'hCG de 1000 mUI/mL ou plus. Le résultat apparaît entre 5 et 10 minutes.

PRINCIPE VAN DE TEST

checkToP® est une analyse qualitative rapide de la présence d'hCG dans la urine. Le test détecte la présence d'un taux d'hCG de 1000 mUI/mL ou plus. Le résultat apparaît entre 5 et 10 minutes.

QUESTIONS / REPONSES

Comment fonctionne le test checkToP®?

Lorsqu'une femme est enceinte, son corps commence à produire l'hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG), qui est excreté dans les urines où sa concentration augmente au fil du temps. Le test checkToP® utilise des anticorps détectant spécifiquement l'hormone hCG dans les urines pour vérifier si son taux est de 1000 mUI/mL ou plus (déterminé selon la référence OMS*). Si l'interruption de grossesse est effective ou si une fausse couche spontanée s'est produite alors le niveau d'hCG devrait tomber en dessous de 1000 mUI/mL dans les 10 à 20 jours. checkToP® ne détecte pas les niveaux d'hCG inférieurs à 1000 mUI/mL, mais peuvent apparaître deux traits de couleur dans la fenêtre de résultat.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe werkt de checkToP® test?

Als een vrouw zwanger wordt, begint haar lichaam een hormoon aan te maken, humaan Chorion Gonadotrofine (hCG) genoemd, dat uitgescheiden wordt in de urine waarin concentratie stijgt in de loop van de tijd. De checkToP® test gebruikt een paar antilichamen die specifiek het hCG-hormoon in de urine detecteren om te controleren of het hoornimivoen 1000 mUI/mL (bepaald ten aanzien van de W.H.O.* referentie) of hoger is. Als de behandeling voor zwangerschapsbreuk doeltreffend was of als er een miskraam is opgetreden, moet de hCG spiegel binnen de 10 tot 20 dagen lager zijn dan 1000 mUI/mL. checkToP® zal geen hCG spiegels lager dan 1000 mUI/mL detecteren, terwijl gewone zwangerschapstesten positief zullen zijn.

*World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie).

Dois je faire le test à un certain moment de la journée ?

Oui, nous recommandons de faire le test avec la première urines du matin qui sont plus concentrées.

La trop grande consommation d'eau ou de boisson peut-elle affecter le résultat ?

Oui, une trop grande consommation de liquide peut diluer l'urine et rendre la détection d'hCG plus difficile. Un apport abnormal de liquide n'est donc pas recommandé.

Que faire si je ne suis pas sûre du résultat du test ?

Si vous ne pouvez pas déterminer si oui ou non une ligne apparaît dans la fenêtre ovale, refaire le test 1 jour après avec un nouveau test checkToP®.

DOIS-je faire le test à un certain moment de la journée ?

Oui, nous recommandons de faire le test avec la première urine du matin qui sont plus concentrées.

What if I am unsure about the result of the test ?

Si vous ne pouvez pas déterminer si oui ou non une ligne apparaît dans la fenêtre ovale, refaire le test 1 jour après avec un nouveau test checkToP®.

Do I need to wait 5 minutes before reading the test ?

Si vous ne pouvez pas déterminer si oui ou non une ligne apparaît dans la fenêtre ovale, refaire le test 1 jour après avec un nouveau test checkToP®.

What if I don't wait the full 5 minutes before reading the test ?

Si vous ne pouvez pas déterminer si oui ou non une ligne apparaît dans la fenêtre ovale, refaire le test 1 jour après avec un nouveau test checkToP®.

How accurate is the test ?

Le test checkToP® est très précis et a été utilisé par des professionnels de santé pour confirmer le succès de l'interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à 9 semaines (hôpitaux et laboratoires).

LECTURE DU RESULTAT

Attendre entre 5 à 10 minutes avant de lire le résultat du test. Dans les 5 à 10 minutes une ligne apparaît dans la fenêtre témoin (la plus petite fenêtre).

IMPORTANT : Ne pas lire avant 5 minutes ou après 10 minutes.

Résultat positif :

Si deux traits roses sont apparus durant les 10 minutes : un trait dans la fenêtre témoin et un autre dans la fenêtre de résultat, le test est positif. Votre taux d'hCG peut être au-dessus de 1000 mUI/mL. Cela pourrait signifier l'échec de la procédure d'interruption de grossesse ou que celle-ci n'est pas complète, ou que la fausse couche spontanée n'a pas eu lieu.

Dans tous les cas, vous devez consulter votre gynécologue.

Remarque: Un trait peut être plus sombre que l'autre. Les deux traits peuvent avoir des nuances rose-violet. Le trait de résultat peut être plus clair ou plus sombre que le trait témoin. Toutefois, vous devriez voir clairement deux traits parallèles.

Résultat négatif :

Si deux traits roses sont apparus durant les 10 minutes : un trait dans la fenêtre témoin et un autre dans la fenêtre de résultat, le test est positif. Votre taux d'hCG peut être au-dessus de 1000 mUI/mL. Cela pourrait signifier l'échec de la procédure d'interruption de grossesse ou que celle-ci n'est pas complète, ou que la fausse couche spontanée n'a pas eu lieu.

MISES EN GARDE

- checkToP® ne peut pas être utilisé pour les grossesses où le taux d'hCG initial est inférieur à 1000 mUI/mL.

- Utiliser checkToP® uniquement dans le cadre d'un traitement médical prescrit par votre médecin traitant. L'interprétation clinique du test doit être faite avec conformité aux consignes du personnel médical.

Distribué par: NORDIC PHARMA - licence EXELGYN

Information produit: info@exelyn.com / +33(0)1.73.00.16.40

Fabriqué par: VEDALAB

Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cérise B.P.181

61006 ALENCON Cedex France

Résultat négatif :

Si deux traits roses sont apparus durant les 10 minutes : un trait dans la fenêtre témoin et un autre dans la fenêtre de résultat, le test est positif. Votre taux d'hCG peut être au-dessus de 1000 mUI/mL. Cela pourrait signifier l'échec de la procédure d'interruption de grossesse ou que celle-ci n'est pas complète, ou que la fausse couche spontanée n'a pas eu lieu.

Dans tous les cas, vous devez consulter votre gynécologue.

Remarque: Un trait peut être plus sombre que l'autre. Les deux traits peuvent avoir des nuances rose-violet. Le trait de résultat peut être plus clair ou plus sombre que le trait témoin. Toutefois, vous devriez voir clairement deux traits parallèles.

Distribué par: NORDIC PHARMA - licence EXELGYN

Information produit: info@exelyn.com / +33(0)1.73.00.16.40

Fabriqué par: VEDALAB

Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cérise B.P.181

61006 ALENCON Cedex France

Négatif testresultaat:

Si deux traits roses sont apparus durant les 10 minutes : un trait dans la fenêtre témoin et un autre dans la fenêtre de résultat, le test est positif.



Selbsttest zur Überprüfung des Ergebnisses eines Schwangerschaftsabbruchs im ersten Trimester oder einer Fehlgeburt

1000 mUI/mL

EINLEITUNG

Der checkTop® Test ist kein klassischer Schwangerschaftstest. checkTop® ist ein Urinschnelltest mit geringer Sensitivität zur Konzentrationsbestimmung des humanen Choriongonadotropins (hCG) für die Anwendung zu Hause, um das Ergebnis eines vorangegangenen bestätigten Abbruchs einer intrauterinen Schwangerschaft im ersten Trimester oder einer Fehlgeburt zu überprüfen.

Ein angehöriger der Gesundheitsberufe wird Ihnen sagen, ob und wie sie diesen Test anwenden sollen.


INHALT

Ref. 3066-1000AI: Jede Packung enthält eine (1) Gebrauchsinformation und einen (1) checkTop® Test, der in einem hermetisch verschlossenen Aluminiumbeutel zusammen mit einem Trockenmittelbeutel verpackt ist.

Ref. 3067-1000AI: Jede Packung enthält zwanzig (20) Gebrauchsinformationen und zwanzig (20) checkTop® Tests, die jeweils in einem hermetisch verschlossenen Aluminiumbeutel zusammen mit einem Trockenmittelbeutel verpackt sind.

TESTVERFAHREN

checkTop® ist ein qualitativer Schnelltest auf das Vorhandensein von hCG im Urin. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten wird eine hCG-Konzentration von 1000 mUI/mL oder mehr erkannt. Wenn die hCG-Konzentration unter 1000 mUI/mL liegt, erscheint nur ein farbiger Strich im Kontrollfenster, aber kein farbiger Strich im Testfenster. Wenn die hCG-Konzentration über 1000 mUI/mL liegt, erscheinen zwei farbige Striche, und zwar in jedem Fenster.

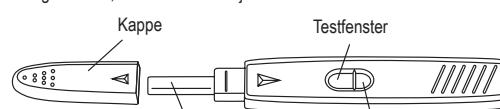

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wie funktioniert der checkTop® Test?

1. Dieser Test ist ausschließlich zur äußeren Anwendung (*In-vitro*-Diagnose) gedacht. Bitte nicht herunterschlucken.
2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Testdurchführung aufmerksam durch. Der Test liefert nur dann ein zuverlässiges Ergebnis, wenn die Anweisungen strikt befolgt werden.
3. Zwischen +4 °C und +30 °C lagern. **Nicht einfrieren.**
4. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Das Verfallsdatum ist auf jedem Aluminiumbeutel sowie auf dem Umschlag aufgedruckt. Nicht verwenden, wenn der Aluminiumbeutel beschädigt ist.
5. Der checkTop® Test darf nicht mehrmals verwendet werden.
6. Den Test für Kinder unzugänglich aufbewahren.
7. Nach dem Gebrauch alle Bestandteile im Haushaltsabfall entsorgen.

DURCHFÜHRUNG

Dieser Test ist ausschließlich zur Anwendung nach einem Schwangerschaftsabbruch vorgesehen. Den genauen Zeitpunkt teilt Ihnen Ihr Frauenarzt mit, üblicherweise 10 bis 20 Tage nach

- Einnahme des ersten Arzneimittels bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch

- einer Fehlgeburt

1. Nehmen Sie das checkTop® Teststäbchen aus dem Aluminiumbeutel. Entfernen Sie den kleinen Trockenmittelbeutel.

2. Nehmen Sie die Schutzkappe vom Teststäbchen und



- halten Sie die saugfähige Spitze entweder 5 bis 10 Sekunden lang direkt in Ihren Urinstrahl.

Achten Sie darauf, dass kein Urin in das Testfenster gelangt!

- oder sammeln Sie Ihren Urin in einem sauberen, trockenen Behälter und laufen Sie die saugfähige Spitze 5 bis 10 Sekunden lang in Ihren Urin, bis sie sich ganz volgesogen hat.

3. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf das Teststäbchen.

4. Legen Sie das Teststäbchen mit den beiden Sichtfenstern nach oben auf eine trockene, ebene Fläche. Das Ergebnis kann nach 5 bis 10 Minuten in den beiden Sichtfenstern abgelesen werden. Lesen Sie das Testergebnis nicht später als nach 10 Minuten ab.

ERGEBNISINTERPRETATION

Warten Sie 5 bis 10 Minuten, bevor Sie das Testergebnis ablesen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten erscheint ein Strich im Kontrollfenster (dem kleineren der beiden Fenster).

Wichtig: Lesen Sie das Ergebnis nicht früher als nach 5 Minuten oder später als nach 10 Minuten ab.

Positives Testergebnis:



Wenn innerhalb von 10 Minuten sowohl ein pinkfarbener Strich im Testfenster als auch ein pinkfarbener Strich im Kontrollfenster erscheint, ist der Test positiv. D. h., die hCG-Konzentration liegt wahrscheinlich über 1000 mUI/mL. Das bedeutet, dass der Schwangerschaftsabbruch

Zur Messung von hCG über 1000 mIU/mL

möglicherweise nicht erfolgreich oder nicht vollständig war oder dass keine Fehlgeburt stattgefunden hat. **Sie sollten auf jeden Fall Ihren Frauenarzt kontaktieren.**


Hinweis: Es ist möglich, dass ein Strich dunkler ist als der andere. Die beiden Striche können mehr oder weniger kräftig pinkfarben sein und müssen nicht den gleichen Farbton aufweisen. Es sollten aber zwei deutlich sichtbare, parallele Striche vorhanden sein.

Negatives Testergebnis:



Wenn nur ein pinkfarbener Strich im Kontrollfenster (dem kleineren Fenster) erscheint und kein Strich im Testfenster (dem größeren Fenster), dann ist der Test negativ. Der Schwangerschaftsabbruch oder die Fehlgeburt ist damit bestätigt.

Nicht eindeutiges Testergebnis:

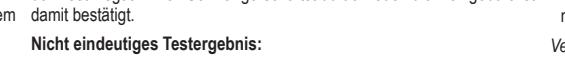

Der Test ist nicht eindeutig, wenn kein farbiger Strich im Kontrollfenster erscheint, selbst dann wenn ein farbiger Strich im Testfenster erscheint. In diesem Fall wird empfohlen, den Test nach 24 Stunden mit einem neuen checkTop® Test und einer frischen Urinprobe zu wiederholen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Wie funktioniert der checkTop® Test?

Wenn eine Frau schwanger wird, beginnt ihr Körper das Hormon humanes Choriongonadotropin (hCG) zu produzieren, das in den Urin ausgeschieden wird. Die Konzentration nimmt mit der Zeit zu. Der checkTop® Test verwendet ein Paar Antikörper, die spezifisch das Hormon hCG im Urin erkennen, um zu bestimmen, ob die Konzentration 1000 mUI/mL (festgelegt durch die W.H.O.* Referenz) oder mehr beträgt. Wenn der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch erfolgreich war oder eine Fehlgeburt stattgefunden hat, sollte die hCG-Konzentration innerhalb von 10 bis 20 Tagen unter 1000 mUI/mL sinken. checkTop® erkennt keine hCG-Konzentrationen unter 1000 mUI/mL, während klassische Schwangerschaftstests noch positiv wären.

* World Health Organisation.

Sollte man den Test zu einer bestimmten Tageszeit durchführen?

Ja, wir empfehlen, den checkTop® Test mit dem ersten Morgenurin durchzuführen, da dieser konzentriert ist.

Kann die Flüssigkeitsmenge, die ich zu mir genommen habe, das Testergebnis beeinflussen?

- Wenn Sie große Mengen Flüssigkeit trinken, kann das Ihren Urin verdünnen und die hCG-Bestimmung erschweren. Eine besonders hohe Flüssigkeitsaufnahme vor dem Test ist somit nicht empfehlenswert.

Was soll ich tun, wenn ich das Testergebnis nicht sicher interpretieren kann?

Wenn Sie nicht eindeutig entscheiden können, ob ein Strich im ovalen Testfenster vorhanden ist oder nicht, wiederholen Sie den Test nach einem Tag mit einem neuen checkTop® Test.

Wenn Sie die Gebrauchsanweisung befolgen, sollten Sie ein zuverlässiges Ergebnis erhalten. Bestimmte Arzneimittel, die hCG enthalten oder in Kombination mit hCG angewendet werden (wie z. B. Predalon, Pregnyl oder Menogon), und einige seltene Erkrankungen können ein falsch positives Ergebnis verursachen. Alkohol, Analgetika, Antibiotika, Antibabypillen, Hormontherapien mit Clomiphencitrat (wie z. B. Clomid, Serophen) oder Schmerzmittel sollten das Testergebnis nicht beeinträchtigen.

Ich habe die saugfähige Spitze länger als 10 Sekunden im Urin gelassen. Ist das Ergebnis trotzdem korrekt?

Ja, einige Sekunden mehr haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Ich habe die saugfähige Spitze weniger als 5 Sekunden im Urin gelassen. Ist das Ergebnis trotzdem korrekt?

Nein, weil die Urinmenge für die Analyse eventuell nicht ausreicht.

Was ist, wenn der Strich im Testfenster dunkler oder heller als der Strich im Kontrollfenster ist?

Ja, in jedem Fenster eindeutig ein Strich zu sehen ist, ist das Testergebnis positiv.

Was tue ich, nachdem ich das Testergebnis habe?

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres betreuenden Arztes.

Was passiert, wenn ich das Testergebnis absele, bevor 5 Minuten vergangen sind?

Wenn Sie den Test ablesen, bevor 5 Minuten vergangen sind, ist die Analyse eventuell noch nicht beendet und das Testergebnis kann ungünstig sein.

WICHTIG: Ergebnisse, die später als 10 Minuten nach eintauchen der saugfähigen Spitze in den Urin abgelesen werden, sind nicht verwertbar.

Was genau ist der Test?


Der checkTop® Test ist sehr genau und wird auch von medizinischen Fachkräften in Krankenhäusern und Laboratorien eingesetzt, um den Erfolg eines medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs, der innerhalb von 9 Wochen der Amenorrhoe durchgeführt wurde, zu bestätigen. Evaluationsergebnisse zeigen, dass checkTop® in über 99 % aller Fälle eine hCG-Konzentration von über 1000 mUI/mL erkennt. Aber kein Test ist unfehlbar. Selbst wenn das Testergebnis negativ ist, sollten Sie Ihren



Test autodiagnóstico para la verificación del resultado de la interrupción de la gestación (IVG) al primer trimestre o aborto espontáneo.


Per la misurazione dell'hCG al di sopra delle 1000 mUI/mL

Risultato negativo:

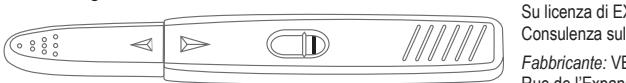

Distribuito da: NORDIC PHARMA
Su licenza di EXELGYN
Consulenza sul prodotto: info@exelgyn.com / +33(0)1.73.00.16.40
Fabbricante: VEDALAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerisé B.P.181
61006 ALENCON Cedex France

Test non valido:

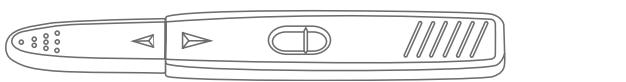

Se compare solo una striscia di colore rosa nella finestra di controllo (la finestra più piccola) e non compare alcuna striscia nella finestra di test (la finestra più grande), il test è negativo. L'interruzione di gravida o l'aborto spontaneo sono confermati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ref. 3066-1000AI:

Ciascuna confezione contiene un (1) foglio con le

istruzioni per l'uso e un (1) test checkTop® confezionato in un sacchetto

in alluminio sigillato ermeticamente contenente 1 bustina di essiccante.

Ref. 3067-1000AI:

Ciascuna confezione contiene venti (20) fogli con le

istruzioni per l'uso e venti (20) test checkTop® confezionati in un sacchetto

in alluminio sigillato ermeticamente contenente 1 bustina di essiccante.

PRINCIPIO DEL TEST

checkTop®

è un test qualitativo rapido che rileva la presenza di hCG nelle

urine. In un tempo compreso tra 5 e 10 minuti rileva un livello di hCG pari

o superiore a 1000 mUI/mL.

Quando il livello di hCG è inferiore a 1000 mUI/mL, comparirà solo una

striscia colorata nella finestra di controllo ma non nella finestra di test.

Quando il livello di hCG è superiore a 1000 mUI/mL compariranno due

strisce colorate, una per ciascuna finestra.

DOMANDE E RISPOSTE

Come funziona il test checkTop®?

Quando una donna entra in gravidanza, il suo organismo inizia a produrre un ormone, la gonadotropina corionica umana (hCG), che viene escreta nelle urine quando, con il tempo, la sua concentrazione aumenta. Il test checkTop® usa una coppia di anticorpi che rilevano in maniera specifica l'ormone hCG nelle urine per verificare se il livello dell'ormone è pari o superiore a 1000 mUI/mL (determinato in base agli standard di riferimento dell'OMS). Se il trattamento per l'interruzione di gravida è stato efficace, o se si è verificato un aborto spontaneo, il livello di hCG deve scendere al di sotto delle 1000 mUI/mL entro 10-20 giorni. checkTop® non rileva livelli di hCG inferiori a 1000 mUI/mL. Mentre, per tali valori di hCG, i classici test di gravida saranno positivi.

Organizzazione Mondiale della Sanità

Devo eseguire il test in un momento specifico della giornata?

Si, raccomandiamo di eseguire il test con checkTop® sulla prima urina del mattino che dovrebbe essere più concentrata.

6. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

7. Dopo l'uso gettare tutti i componenti del kit nei rifiuti domestici.

PROCEDURA

Il test deve essere eseguito dopo l'interruzione di gravida nel momento indicato dal suo ginecologo, di solito 10-20 giorni dopo

- la prima assunzione del farmaco per la IVG medica

- l'aborto spontaneo

1. Rimuovere il dispositivo del test checkTop® dal sacchetto in alluminio.

Gettare il sacchetto.

2. Rimuovere il cappuccio e:

Se segue le istruzioni, dovrebbe ottenere risultati accurati. Alcuni farmaci

che contengono hCG o che vengono usati in associazione ad hCG (quali

Pregnyl, Profasi, Personal e rare condizioni mediche possono causare

un risultato falso positivo. L'alcool, gli analgesici, gli antibiotici